

Smartbox



INSTRUKTIONER

IoT Installations guide

VIKTIGT: Den elektroniska versionen av detta dokument är den gällande versionen. Det är användarens ansvar att säkerställa att eventuella utskrivna kopior är den senaste revisionen. Senaste svenska version finns på www.moovon.se support-manualer

Instruktioner

Driftsättningsanvisningar

Nödvändig utrustning

Grid Pad Pro 10S, Pro och Eye 12, Pro och Eye 15 (flera USB-A portar)

1x IoT återställnings USB
1x USB Tangentbord



Grid Pad Go 8 Gen2 och Go 10 Gen2 (dessa har 1st USB-C)

1x IoT återställnings USB
1x USB Tangentbord
1x USB C Hub med strömförsörjning (då risk finns att inte USB-C orkar driva utan extra ström)



Instruktioner

Anslutning

Grid Pad Pro 10S

Anslut återställnings USB vid röd cirkel.
Anslut tangentbordet vid gul cirkel.



Grid Pad 12 / 15

Anslut återställnings USB vid röd cirkel.
Anslut tangentbordet vid gul cirkel.



Grid Pad Go 8 och 10 (Zebra)

Anslut både återställnings USB och tangentbord till USB-hubben.
Anslut sedan USB-hubben till USB-C porten på apparaten.


Instruktioner

Uppstart

1. Anslut USB-minne och tangentbord enligt tidigare instruktioner för **Anslutning**.

För Grid Pad 10s, Grid Pad 12, Grid Pad 15

2. Starta apparaten.
3. Under upstart tryck upprepade gången på **F7** tills meny nedan kommer upp:

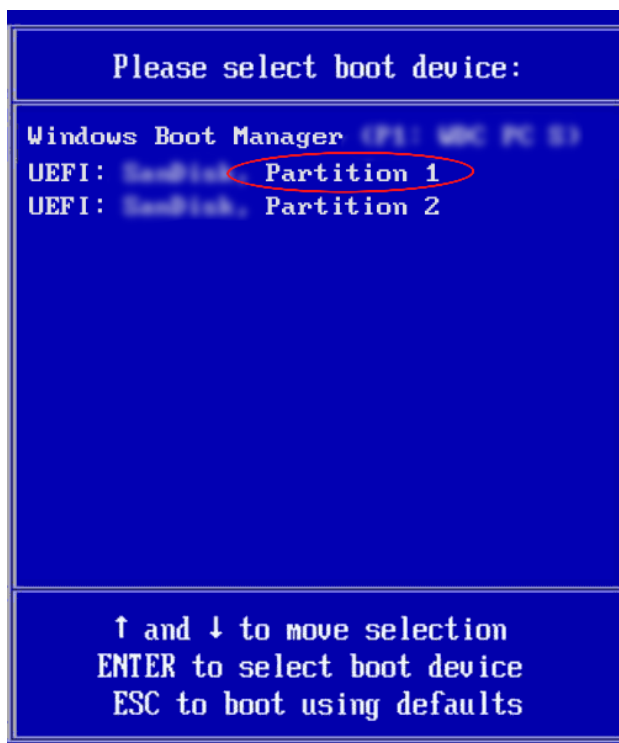

4. Välj **"Partition 1"** (OBS, kan se lite olika ut beroende av apparat)

For Grid Pad Go 8 / 10 (Zebra)

5. Starta enheten.
6. Under upstart tryck upprepade gången på **ESC** tills meny ovan kommer upp:
7. Navigera med piltangenterna till "Boot menu" och tryck enter.
8. Välj "Partition 1" från listan.

När installationen är klar, ta bort USB-minnet/Hubben och starta om apparaten. När apparaten startat upp fortsätt med att aktivera den nya Windows IoT nyckeln och klistra etiketten på apparatens baksida.